
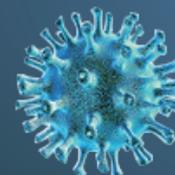


ウイルス RNA 抽出キット

NIPPONGENE ISOSPIN RNA Virus

~ For coronavirus RNA extraction ~

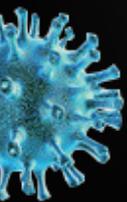

Code No.	製品名	包装単位	希望納入価格(税抜)
102-2510	NIPPONGENE ISOSPIN RNA Virus ~For coronavirus RNA extraction~	100回用	55,000 円

スピнкаラムを用いて喀痰^{※1}、鼻咽頭ぬぐい液、唾液、血清等の体液からウイルスRNAを抽出・精製するためのキットです。カオトロピックイオン存在下でRNAがシリカへ吸着する原理を応用しており、フェノールやクロロホルム等の毒性有機溶媒を使用しません。ウイルスの溶解や夾雑タンパク質の分解に最適な抽出液とProteinase Kを採用しており、約30分で高純度のRNAを容易に得ることができます。

※1. 別途前処理が必要です。



特長

- 約30分でウイルスRNAを精製可能
- スピнкаラムで高い操作性
- PCR法等で高感度に検出可能



構成

	容量(100回用)	保管温度
Proteinase K (20 mg/ml)	1 ml × 2 本	-20°C
NIRV Extraction Buffer	18 ml × 2 本	室温
NIRV Wash1 Buffer	30 ml × 2 本	室温
NIRV Wash2 Buffer	30 ml × 2 本	室温
ddWater (RNase free)	1 ml × 6 本	室温
Spin Column	50 本 × 2 袋	室温
Collection Tube	50 本 × 4 袋	室温

輸送温度：室温（到着後、Proteinase Kは-20°C保存）

本キットについて

- ・本製品は、試験研究用です。
- ・本製品は、富山大学 学術研究部医学系 微生物学講座の森永芳智教授・谷英樹准教授との共同研究の成果をもとに開発されました。

プロトコール



詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.nippongene.com/>

株式会社ニッポンジーン

〒930-0834 富山市問屋町二丁目7番18号
TEL: 076-451-6548 FAX: 076-451-6547
URL: <https://www.nippongene.com>