

OneSTEP Marker 5 (φX174/HincII digest)

I. 製品説明

本品は、φX174 DNA を制限酵素 HincII で完全分解したものであり、DNA 分子量マーカーに適しています。

II. 保存

室温
長期保存する場合は冷蔵 (2-8°C) で保存してください。


III. 濃度

0.04 μg / μl

IV. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)
10 mM EDTA
20 mM NaCl
0.004% Bromophenol Blue
0.004% Xylene Cyanol FF
10% Glycerol

V. フラグメントサイズ対応表

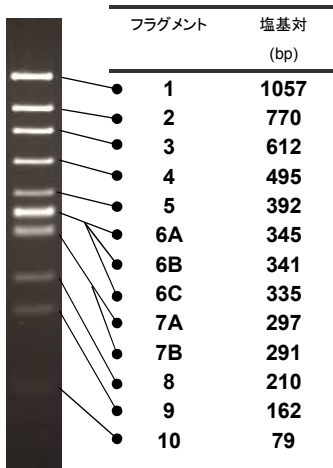

3% Agarose 21
EtBr 染色

VI. 使用方法

- ・ 通常 1 レーンあたり 5 μl でご使用下さい。
- ・ 色素およびグリセロールを含有しているので調製の必要はありません。そのまま電気泳動ゲルにアプライしてご使用下さい。

本品は、試薬 (試験研究用) として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。